

5 мм
АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Teleflex
MEDICAL

WECK® Hem-o-lok®

Auto Endo5™

Автоматический одноразовый 5 мм – клипапplikатор

Hem-o-lok® Auto Endo5™

обеспечивает безопасное и быстрое лигирование сосудов для лапароскопической хирургии

Автоматическая подача

Аппликатор содержит 15 клипс Hem-o-lok® размера ML, подаваемых через 5 мм порт

Тактильный отклик

Подтверждает закрытие клипсы Hem-o-lok®

Гибкая петля клипсы

Снижает вероятность выпадения клипс, экономя их расход и время работы

Биоинертные полимерные клипсы

Клипсы Hem-o-lok® сделаны из нерассасывающегося полимера, поэтому они инертны, нетоксичны и пропускают рентгеновские лучи



WECK®

Уникальный дизайн и полимерная технология клипс Hem-o-lok® устанавливают новый стандарт лигирования сосудов.

1. Удерживающие бугорки клипсы идеально входят в бранши аппликатора, предупреждая выпадение клипс


2. Зубцы на клипсе предотвращают ее соскальзывание в любом направлении

3. Поверхностные свойства нерассасывающегося полимера предотвращают развитие инфекционных осложнений

4. Гибкая петля позволяет хирургу переустанавливать клипсу перед ее закрытием

5. Защелкивающийся замок клипс позволяет избежать разрезания и обеспечивает надежное лигирование сосудов от 3 мм до 10 мм

6. Тактильный отклик подтверждает, что аппликатор Hem-o-lok® закрыт на сосуде

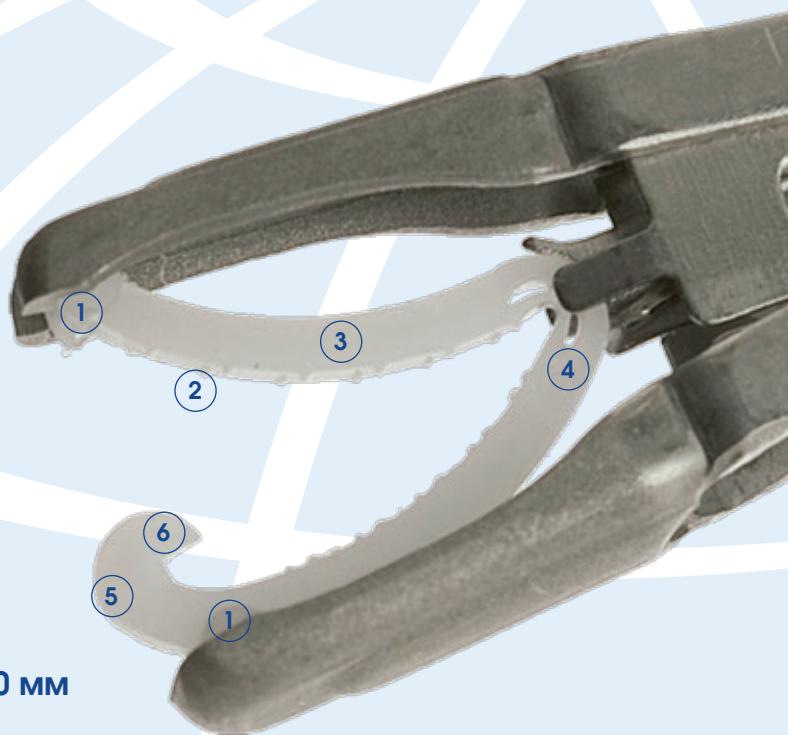


Информация для заказа

543965 Endo5™ Одноразовые Автоматические Клипаппликаторы

15 клипс Hem-o-lok® в аппликаторе, 3 аппликатора в коробке, стерильно

544121 Устройство для снятия клипс

Рабочая длина 32 см, диаметр 5 мм (только для клипс размером ML и L)

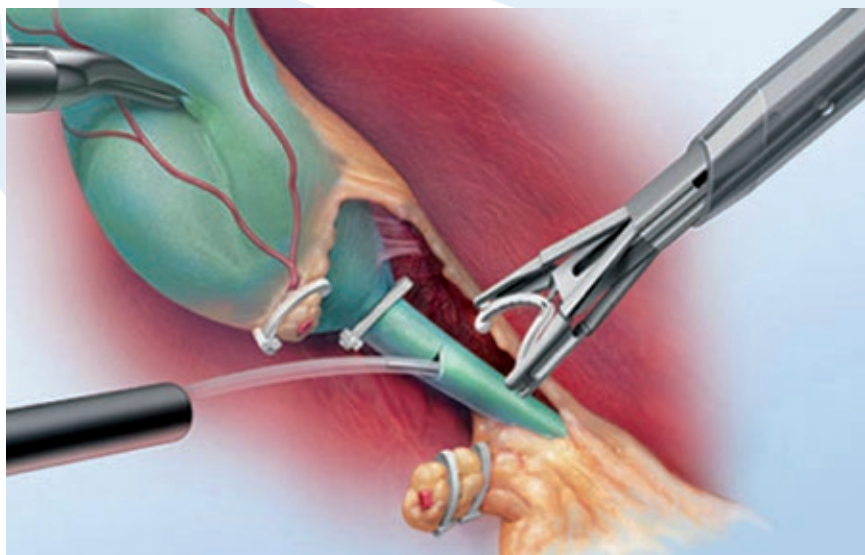

СЭЙДЖ

Эксклюзивный импортер
Teleflex Medical (WECK)

В России

+7 (495) 234 3945, 234 3946

info@sagemed.ru